

Slovenčina

Hvala ker ste izbrali bathmate®: Zanesljiv izdelek, ki smo ga izdelali za vaše zadovoljstvo. Temu smo namenili deset let študij in več kot 60 let raziskovanja s pomočjo strokovnjakov, na področju visoko kakovostne izdelave potrošnih izdelkov, in postavili Bathmate® na sam vrh vodilnih podjetij tega področja na svetu. Prosimo vzemite si nekaj minut časa in pozorno preberite varnostna navodila za uporabo Bathmate®, saj si želimo, da izdelek izkoristite v celoti in čimbolj enostavno.

Varnostna navodila: Pred uporabo izdelka Bathmate®, vas prosimo, da navodila preberete natančno in v celoti.

- Z naše spletne strani naložite priročnik za navodila in omogočite dostop vsem, ki izdelek uporabljajo.
- Zaradi osebne higiene in varnosti, ne delite izdelka Bathmate® z drugimi, razen če izdelek pr red tem očistite z Bathmate® čistilnimi tabletami.
- Ne uporabljajte izdelka v okoliščinah, ki zahtevajo posebno pozornost. (Kot na primer: med vožnjo, ali med tem ko pazite na novorojenčka ali otroka.)
- Vedno poskrbite, da je izdelek Bathmate® pred shranjevanjem očiščen in suh, ter da ga hranite na sobni temperaturi.
- Izdelek hranite na varnem mestu, saj lahko le tako preprečite možne poškodbe na izdelku.

Primerna uporaba izdelka bathmate®

- "Primerna uporaba" pomeni, da morate izdelek uporabljati po danih navodilih.
- "Nepriprava uporaba" pomeni, da se pri uporabi izdelka, ne držite danih navodil.

Ne shranjujte izdelka na dosegu otrok, saj razstavljen izdelek vsebuje majhne delce, kar lahko privede do zadušitve.

Pred uporabo izdelka Bathmate®, natančno preberite navodila za uporabo tega izdelka.

Pred uporabo izdelka Bathmate® se priporoča posvet z zdravnikom, posebno osebam s srčnimi in pljučnimi boleznimi; **osebam z visokim krvnim pritiskom; tistim, ki so preboleli kap; imajo epilepsijo ali motnje tresenja; urinarne motnje, kot so težave z ledvicami, mehurjem, testisi ali s spolnim udom; ter diabetikom.**

V primeru težav pri uporabi izdelka Bathmate®, nemudoma prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom!


Izdelek ne uporabljajte, če niste prebrali navodil. Izdelek je primeren za recikliranje.

Paket vključuje:

- 1 x bathmate vodna črpalka,
- 1 x navodila za uporabo,
- 1 x merilni instrument za rast.

Set za čiščenje vključuje:

- 1 x torbica za shranjevanje,
- 2 x gobica za čiščenje,
- 1 x krtača za čiščenje,
- 8 x čistilne tablete,
- 1 x držalo za kondome,
- 2 x kondom,
- 1 x brisačka,
- 1 x merilni instrument za rast,
- 1 x trak za tuš (po izbiri)

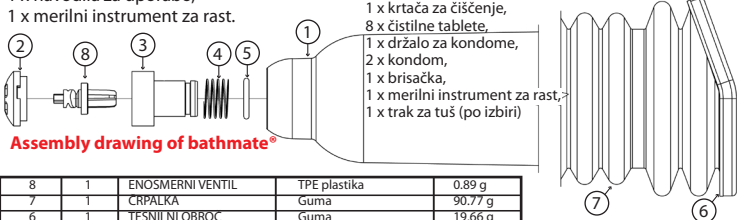

Assembly drawing of bathmate®

IZDELEK	KOLIČINA	OPIS	MATERIAL	TEŽA
8	1	ENOSMERNI VENTIL	TPE plastika	0,89 g
7	1	ČRPALKA	Guma	90,77 g
6	1	TESNILNI OBRROC	Guma	19,66 g
5	1	O-TESNILO	Guma	0,21 g
4	1	VZMET	Nerjaveče jeklo	0,48 g
3	1	OHIŠJE VENTILA	Polikarbonat, prozoren	6,61 g
2	1	POKROV VENTILA	Polikarbonat, prozoren	2,77 g
1	1	OHIŠJE Z MERILOM	Polikarbonat, prozoren	108,23 g

Pozor: Izbira primerne velikosti izdelka Bathmate® je ključnega pomena, saj Bathmate® deluje podobno kot obleka za potapljanje, ki se popolnoma prilaga telesu a je znotraj nje plast vode, ki greje telo. Zaradi nepravilne izbire velikosti, je vodna črpalka prevelika za penis, zaradi česar ne boste dosegli željenih optimalnih rezultatov. Ko je penis v erekciji se zmanjša volumen vode v črpalki, kar zmanjša celotno razmerje teže, izgube temperature in poveča se notranji negativni pritisk. Toplota vode varno odpre in poveča žilne poti, kar omogoča, da kri počasi zalije tkivo penisa. Zato vedno pred nakupom dobro preberite tabelo o velikosti, saj boste le tako dosegli optimalne rezultate, popolno ugodje in vidno povečanje – pri obsegu, kot tudi dolžini.

Navodila za uporabo bathmate® traka za tuš

Bathmate® trak za tuš, je bil izdelan za maksimalno udobje in enostavno uporabo, pri kateri imate proste roke, med tem ko uporabljate svoj Bathmate® pod tušem ali v banji. Trak lahko namestite preko vratu ali preko ramena, in imeli boste proste roke med kopanjem ali tuširanjem.

Navodilo za uporabo bathmate® izdelka v banji – korak za korakom-

Prva uporaba se priporoča prav v banji, saj si boste na enostaven način nabrali izkušnje, ki jih potrebujete za doseg optimalnih rezultatov.

- Namakajte se 5 minut, da sprostite mošnjo in testise, ko ste sproščeni, penis dodatno sprostite z kratko predigro. Pazite, da bo nivo vode dovolj visok (do pasu), saj drugače ne morete uporabljati izdelka v položaju v katerem se nagnete nazaj.
- Napolnite vodno črpalko z vodo iz banje, pravilno obrnite črpalko in vstavite penis. Da ustvarite vakuum in ugodje, namestite svoje testise in mošnjo temu primerno.
- Sedaj, ko je črpalka obrnjena navzgor in polna vode je obrnite toliko, da začne voda iz vodne črpalke odtekati. Ko voda odteče iz ohišja, se ustvari negativen pritisk in vaš penis je povečan.
- Vodna črpalka je narejena tako, da z njo postopno dosežete prvotno velikost, z rekompresijo črpalke pa se vam poveča penis in ustvarjeni negativen pritisk v komori. (Če prehitro večate negativen pritisk in s tem na hitro povečate volumen krvi, se lahko pojavi rdečica, pikčasta koža ali modrice okrog penisa; to je običajen pojav pri zračnih črpalkah, pri katerih lahko brez prestanka črpite zrak iz naprave in ustvarjate vakuum.) Bathmate® omogoča počasno in kontrolirano rast in povečanje negativnega pritiska. Ko uporabnik doseže svojo normalno dolžino penisa, Bathmate® ustvari superiorno hidrosilno vakuma, zaradi česa je daleč najbolj varna in udobna povečevalna naprava na planetu.
- Dokler ne dosežete maksimalne normalne velikosti je pomembno, da napravo držite ali pa jo podpirate s trakom za tuširanje. Enkrat, ko to velikost dosežete, hidrosila poskrbi za rast in večji obseg penisa. Ne pozabite, če je pritisk prevelik, enostavno pritisnite na ventil za sproščanje pritiska na vrhu naprave, kar bo zmanjšalo vakuum in občutek, ki ga imate zaradi prevelikega pritiska. (Zaradi velikega volumna ohišja, dosežete ravnovesje in vakuum, šele ko dosežete maksimalni negativni pritisk.)
- Zdaj, ko ste povečali penis, lahko ugotovite, da z malimi kompresijami vode, ki jo izpuščate skozi vrh črpalke, to naredite na naraven način z 20 minutno uporabo. (Penis je navadno povečan za velikost jajca.) To povečano velikost lahko dosežete na naraven način pri naslednji erekciji.

Navodilo za uporabo bathmate® izdelka pod tušem – korak za korakom-

Da bi lahko uporabljali izdelek Bathmate® pod tušem, se morate držati sledečih navodil:

Nekaj časa se sproščajte pod tušem, da sprostite in zmehčate mošnjo. Namestite si trak za tuš na pravilno in udobno dolžino, vendar ga še ne pripnite na Bathmate®. Obrnite Bathmate® in ga napolnite z vodo do roba. S prstom zamašite ventil za sproščanje pritiska, saj se vam voda v nasprotnem primeru tu odteka. V napolnjen Bathmate® z vodo namestite ohlapen penis, črpalko namestite na medenični predel, testisi naj ostanejo zunaj. Sedaj lahko ustvarite vakumski pritisk, tako da potiskate črpalko proti medeničnemu delu. Pritisk lahko

Specifikacije izdelka

	Hercules	Goliath
Teža:	250g	330g
Širina: vrh/osnova	24 min/84 max	24 min/115 max
Dolžina:	296mm	350mm
Max obseg penisa:	46mm	65mm
Max dolžina penisa:	200mm	260 mm
Trajanje uporabe:	20 minut	20 minut
Max čas uporabe:	Enkrat na dan	Enkrat na dan
Max vakum zraka:	-0.17 bar	-0.17 bar
Max vakum vode:	-0.40 bar	-0.40 bar

Izdelek je narejen iz visoko kakovostnega polikarbonata, koži prijazne gume in nerjavečega jekla

Deklaracije Proizvajalca

Garancija: proizvajalec jamči za pravilno delovanje izdelka v času 24 mesecev od dneva nakupa. Izjeme so dodatki, ki so kupljeni skupaj z izdelkom ali pozneje, saj imajo zaradi svojih karakteristik krajšo servisno dobo, ki je odvisna od pogostosti uporabe.

- Garancija začne veljati z dnevom nakupa. Zato vam priporočamo, da shranite račun kot dokazilo o nakupu, saj brez računa ne morete uveljavljati garancije.
- Na vašo željo vam v času garancijskega roka, katerikoli okvarjeni del zamenjajo. V primeru, da izdelka ni možno popraviti, izdelek nadomestijo z novim.
- Garancije ne morete uveljaviti če se ugotovi neprimerna uporaba izdelka (namerna poškodba, padec na tla, nepravilno sestavljanje ali razstavljanje izdelka). Prav tako nimate pravice do garancijskega popravila v primeru, če je izdelek predhodno popravljala nepooblaščen oseba ali nepooblaščen servis.
- V primeru uveljavljanja garancije pošljite, ali osebno odnesite izdelek skupaj z dodatki in računom, na pooblaščen servis.
- Vaše pravice po obligacijskem zakonu niso povezane s to garancijsko izjavo in ostajajo iste kot veleva zakon. Garancijo lahko uveljavljate v vseh državah izven EU ali ZDA, če pri tem ne kršite državnega zakona pogodbe o garanciji.

Ce Deklaracija O Skladnosti: ta izdelek ustreza potrebni zahtevam Direktive 89/336/EC.

Deklaracijo si lahko preberete na www.bathmate.eu

Preden izdelek odvržete, prosimo upoštevajte regulacije o varnosti okolja.

Zelena Deklaracija: Vaš Bathmate® izdelek je bil izdelan iz visoko kakovostnih materialov in s tem simbolom vas prijazno naprošamo, da izdelek reciklirate. S tem boste prispevali svoj delež k ohranitvi čistega okolja v katerem živite.

Hvala.

ustvarite tudi tako, da naslonite črpalko na stabilno steno in porivate z boki proti zidu. Pozor: če imate manjši Bathmate®, bi morda morali začeti tako. Če uporabljate bathmate® z delno nabrekli penisom boste zmanjšali težo vode v črpalki.

Ko se začne ustvarjati vakuum, se priporoča, da se malce naslonite nazaj, saj boste tako izpustili zrak, ki je ostal v komori črpalke.

Sedaj pripnite trak za tuš na Bathmate®.

Sedaj se lahko udobno tuširate, medtem ko vam Bathmate® povečuje penis.

Če želite, lahko neprestano črpite črpalko in s tem trenirate penis, medtem ko se penis povečuje. To lahko naredite s trakom za tuširanje.

Ko želite postopek povečevanja zaključiti, enostavno sprostite ventil za sproščanje pritiska. Ko pritiska ne čutite več, enostavno odstranite Bathmate®.

Da bi izdelek pravilno deloval in imel dolgi rok trajanja, vam po vsaki uporabi priporočamo čiščenje izdelka. Pri čiščenju sledite danim navodilom.

Navodilo Za Uporabo Bathmate® Merilnega Instrumenta In Mere Za Penis

Z merilnim instrumentom za merjenje penisa, boste lahko vedno natančno izmerili dolžino in obseg penisa, na metričen in imperialen način merjenja.

Za merjenje dolžine vašega penisa, postavite merilni instrument poleg penisa, tako da je zgornji del merilnika na vrhu penisa. Sedaj lahko preberete dolžino. Odločite se katero stran uporabljate za metrično ali imperialno merjenje.

Za merjenje obsega vašega penisa, premikajte merilni instrument proti začetku penisa, tako da je merilna naprava pred penisom, vse dokler ni vrzel pri konicastem delu merilnika približna primerjava vaše velikosti. Sedaj merilni instrument nežno povlecite preko penisa, pri tem pa bodite pozorni, da je merilnik malce ohlapan. Tako boste dobili mere vašega obsega, ki jih lahko interpretirate v metričnih in imperialnih rezultatih.

POMEMBNO: ne drsajte s penisom v notranjosti merilnika, saj lahko povzroči nelagodje.

Navodilo za uporabo bathmate® čistilne krtače in zamenljivih gobic

Bathmate® čistilna krtača vam omogoča popolno higiensko sterilno čiščenje Bathmate® vodne črpalke. Na krtačo lahko namestite gobico, s katero dosežete težje dosegljive predele vodne črpalke. Krtačo lahko uporabljate na dva načina: kratek prijem, ko čistite notranji del in dolgi prijem, ko čistite po dolžini komore črpalke in ventili del črpalke. Rabljeno gobico zamenjate tako, da potegnete gobico pod desnim kotom in jo enostavno izpulite. Novo namestite tako, da jo enostavno pritisnete in s pritiskom namestite na krtačo. Prosimo prebrite celotna navodila o čiščenju in tako v celoti izkoristite svojo Bathmate® vodno črpalko.

Varnostna opozorila:

- Ne prekoračite maksimalnega dovoljenega časa uporabe -20 minut- in nikoli ne uporabljajte črpalke, tako da sami sebi povzročate nelagodje. Če vam postavitev in pritrjevanje črpalke ne ugajajo, jo enostavno odstranite in ponovno nastavite.
- Razvoj penisa, z vadbo ali povečanjem, se doseže skozi čas in je v odvisnosti od posameznika. Čudežno ozdravitve ne obstajajo in ne verjemite podjetjem, ki trdijo, da je to možno in obljubljuje čudeže v dneh ali tednih. Vzemite se čas, se sprostite in uživajte v Bathmate® izkušnji.

JONO Bathmate® izumitelj.